

Tecrübe, Kalite, Yenilik ve Bilimin Mükemmel Kesişmesi

bilimplant®
DISCOVER THE SCIENCE

Dental Implant Sistemi



ÜRÜN KATALOĞU 2023-24

BİLİMİ KEŞFET

DISCOVER THE SCIENCE

DÉCOUVRIR LES SCIENCES

ZBULONI SHKENCËN

ODKRYTE ZNANOST

SCOPRI LA SCIENZA

WISSENSCHAFT ENTDECKEN

OTKRYITE NAUKATA

اكتشف العلم

विज्ञान को खोज कर

OTKRYITE DLYA SEBYA NAUKU

ROCK-BIL



Sağlamlıktan Daha Fazlası



www.bilimplant.com



GENEL

Hakkımızda	3
Bilimplant Uygulamaları	4
Bilimsel Danışma Kurulumuz	5



CERRAHİ

SLA Yüzey	6
Drilleme Protokolü	8
İmplant Paketi Kullanım Talimatı.....	9
Bilimplant Tasarımı	11
Kemik ve Doku Seviyesi İmplantlar.....	12
Ø2.9 İnce İmplant	13-14
Kapama Vidaları ve Transfer Parçası.....	15
İyileşme Başlıkları	16



PROTETİK

Dayanaklar	17
Simante Dayanaklar.....	18
a.Kemik Seviyesi Dayanaklar.....	18
b.Doku Seviyesi Dayanaklar	19
Geçici Dayanaklar.....	20
Vida Tutuculu (Multi-unit) Dayanaklar.....	21-22
Hassas Tutuculu (Locator) Dayanaklar.....	23-26
Titanyum Tabanlı (Ti-base) Dayanaklar.....	27-32
Dijital Tarama Parçaları ve Dijital Analoglar.....	31-32
Pre-mill Dayanaklar.....	33-34
İmplant Seviyesi İçin Ölçü Parçaları ve Analoglar.....	35-38
Dayanak Seviyesi İçin Ölçü Parçaları ve Analoglar.....	39-40



ALETLER ve AKSESUARLAR

Cerrahi Set ve İçeriği.....	42-44
Stopper Kit	45
Sinüs Osteotom Seti.....	46
Protetik Kit	47
Kemik Genişletme Kiti	48
Vida Çıkarma Kiti.....	49
All on Four & Dayanak Seçim Kiti.....	50
Dijital Kütüphaneler.....	51



MİSYON

PROİMTECH Sağlık Ürünleri A.Ş. yaşam ve sağlık kalitesinin yükseltilmesi amacıyla teknolojiye en yeni gelişmeleri takip eden, AR-GE çalışmalarıyla kendine her geçen gün yeni değerler ekleyerek yeniliği canlı tutan ve yüksek sağlık/hayat kalitesine herkesin ulaşabilmesi için çaba gösteren bir sağlık firması olmayı hedeflemektedir.



VİZYON

Çağdaş, bilimsel ve yüksek nitelikli üretim hizmeti sunarak, dental sektörde güvenilir ve dünya tarafından tercih edilen bir firma olmak başlıca hedefimizdir.



Kaliteden ve bilimsellikten ödün vermeyen üretim anlayışımızın beklenen bir sonucu olarak; farklı kemik, lokasyon ve yaşlarda yapılan bilimplant uygulamalarının 7 (yedi) yılı aşkın süredir yapılan klinik ve radyografik takiplerinde, bilimsel literatür ile uyumlu olarak periimplantitis, patolojik boyun rezorbsiyonu, vida gevşemesi vb. durumlara yol açmadığı tespit edilmiştir.



Prof. Dr. Alper ALKAN

Prof. Dr., Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm.
Proimtech A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-

Eğitim

- Doktora, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, 1998
- Lisans, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1993

Mesleki Özgeçmiş

- Yrd. Doç. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1999- 2004
- Doçent- Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 2004- 2006
Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2006- 2009
- Profesör- Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2009- 2017
Anabilim Dalı Başkanı 2006 - 2017
Dekan 2009 - 2015
Klinik Gözlemci (St George's Hospital, London, UK) 2010
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul 2017- 2021
Dekan 2017- 2020

Dr. Çağrı URAL


Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ


Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Hasan Ö. GÜMÜŞ


Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

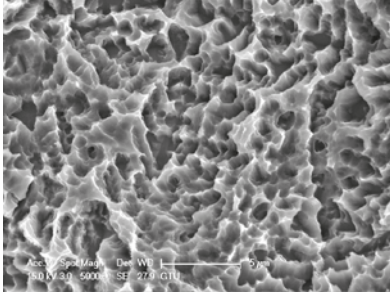

5000x

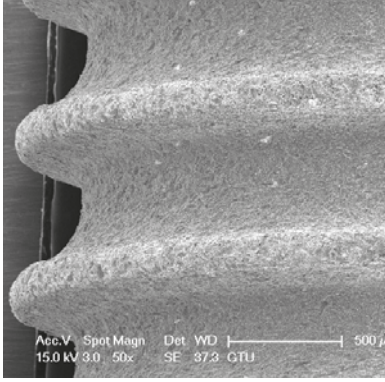


50x

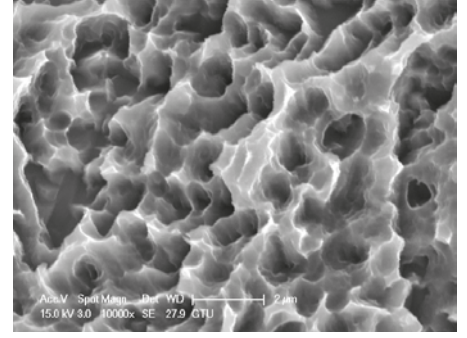

10000x

Tüm implantlarımız; kumlama ve çift asitle pürüzlendirme ile ideal homojen pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Bu SLA (Sandblasted, Large Grit, Dual Acid-Etched) yüzey, implant-kemik kontakt alanını artırarak implant osseointegrasyonunu stimüle eder ve kemik morfolojisine en uygun pürüzlülük oranına sahiptir.

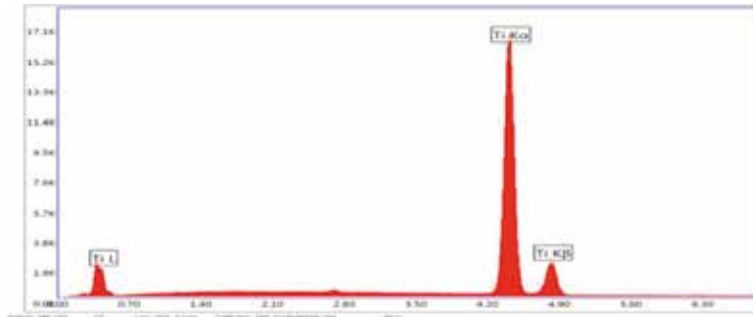


Gebze Teknik Üniversitesi'nde yapılan Edax Analizi sonucunda, biyokontaminasyona sebep olan ve osseointegrasyonu negatif etkileyen hiçbir elemente rastlanmamıştır.


Bilimplant SLA yüzey sayesinde yüksek seviyede kemik- implant teması ile daha iyi ve hızlı osseointegrasyon sağlanmaktadır.



3 Hafta (x4)

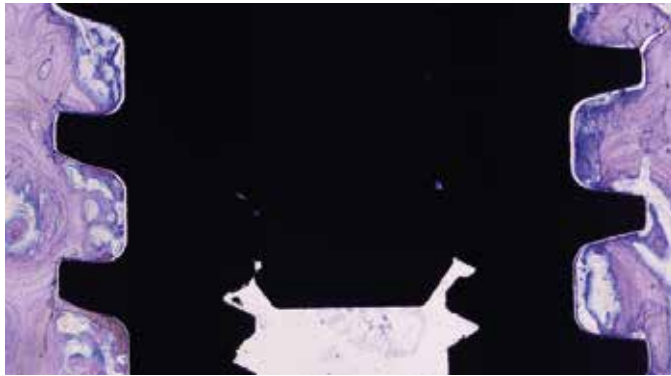

6 Hafta (x4)

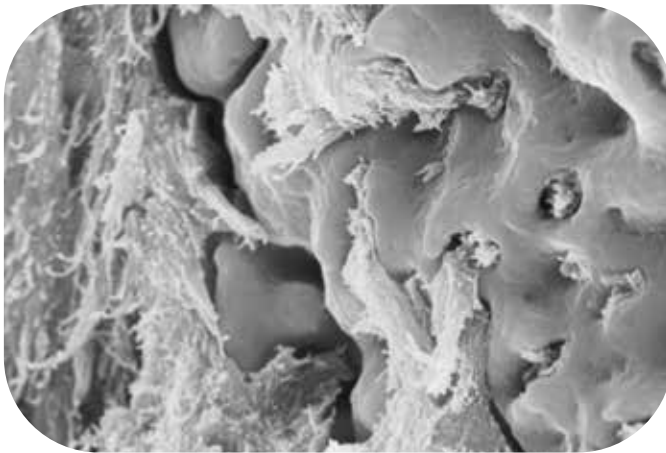

Osseointegrasyon için kritik öneme sahip altı faktör vardır;

- Materyalin biyouyumluluğu
- İmplant dizaynı
- İmplant yüzeyi
- Konakçı kemiğin durumu
- Cerrahi teknik
- Yükleme koşulları


İsmi ve gücünü bilimden alan bilimplant, maksimum osteointegrasyon sağlayabilmek için tamamen bilimsel literatür ışığında üretilmektedir.

Çolpak H.A. Alveoler Kemiğin Vertikal Yükseltilmesi İçin Kemik Grefti Ve Dental Pulpa Kaynaklı Kök Hücre Uygulaması İle Eş Zamanlı Dental İmplant Yerleştirilmesi: Koyun Modelinde Histolojik Ve Histomorfometrik Çalışma. Uzmanlık Tezi. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Aralık 2016

Çolpak H.A., Gönen ZB, Özdamar S, Alkan A, Kütük N. Vertical ridge augmentation using guided bone regeneration procedure and dental pulp derived mesenchymal stem cells with simultaneous dental implant placement: A histologic study in a sheep model.

J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2018 Dec 20. pii: S2468-7855(18)30282-9. doi: 10.1016/j.jormas.2018.12.011.


DRİLLEME PROTOKOLÜ

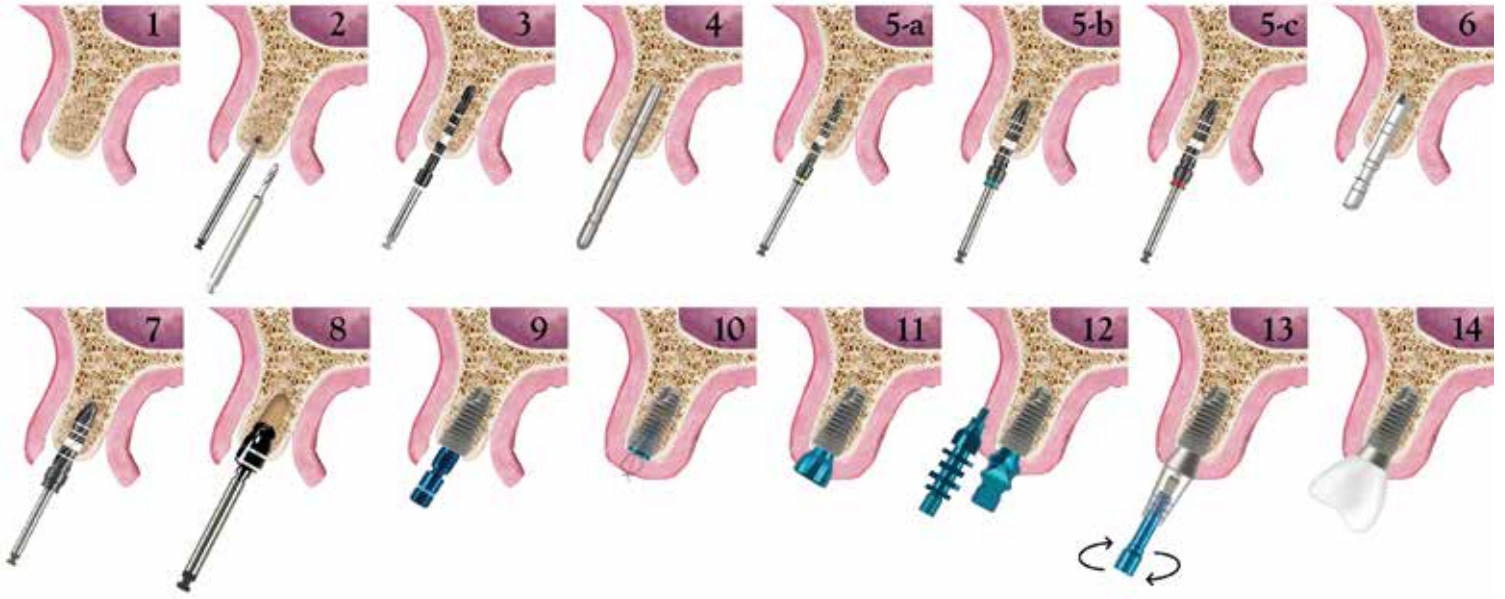

Cerrahi anguldruva (yeşil kuşak, 20:1) ile;
İdeal drilleme (implant yuvasının hazırlanması): Hız 800- 900 rpm / İdeal implant yerleştirme: Hız 30- 40 rpm, tork 30- 40 Ncm

1. İmplant uygulanacak dişsiz bölgede mukoperiosteal tam kalınlık flep kaldırılır ve kemiğe ulaşılır.
2. İşaretleme frezleri ile implantların konulacağı yer işaretlenir.
3. Pilot drill ile implant yuvası açılarak derinlik belirlenir.
4. Hizalayıcı pin ile yuvanın derinliği ve açısı kontrol edilir.
- 5 (a-c). Yerleştirilmesi planlanan çap ve boydaki implantın final drillinden önceki driller ile implant yuvası genişletilir.
6. Paralel pin ile yuvanın derinlik ve açısı kontrol edilir.
7. Final drill uygulandıktan sonra implantın yerleştirilmesi için yuva hazır hale gelir.
8. Özellikle sert kemiklerde implantın boyun kısmındaki sıkışmayı ve marjinal kemik nekrozunu önlemek için kortikal drill ile yuvanın boyun kısmı genişletilir.

9. İmplant, steril kutusundan raşet ile veya anguldruva ile alınır ve hazırlanan yuvaya saat yönünde çevirerek yerleştirilir.
10. İmplant yerleştirildikten sonra yumuşak dokunun implant içine girmesini önlemek için kapama vidası saat yönünde sıkılarak yerleştirilir ve ameliyat sahası primer olarak kapatılır.
11. 8-12 haftalık osseointegrasyon süresi beklendikten sonra implant üzeri açılır ve kapama vidası çıkarılarak diş eti uyumu için uygun olan iyileşme başlığı yerleştirilir.
12. Diş eti uyumu sağlandıktan sonra açık veya kapalı yöntem ile ölçü alınır.
13. Hastaya uygun olan dayanak seçilir ve 30 Ncm kuvvet ile sabitlenir.
14. Protetik aşamalardan sonra hazırlanmış olan kron, dayanak üzerine yapıştırılır veya vidalanır.

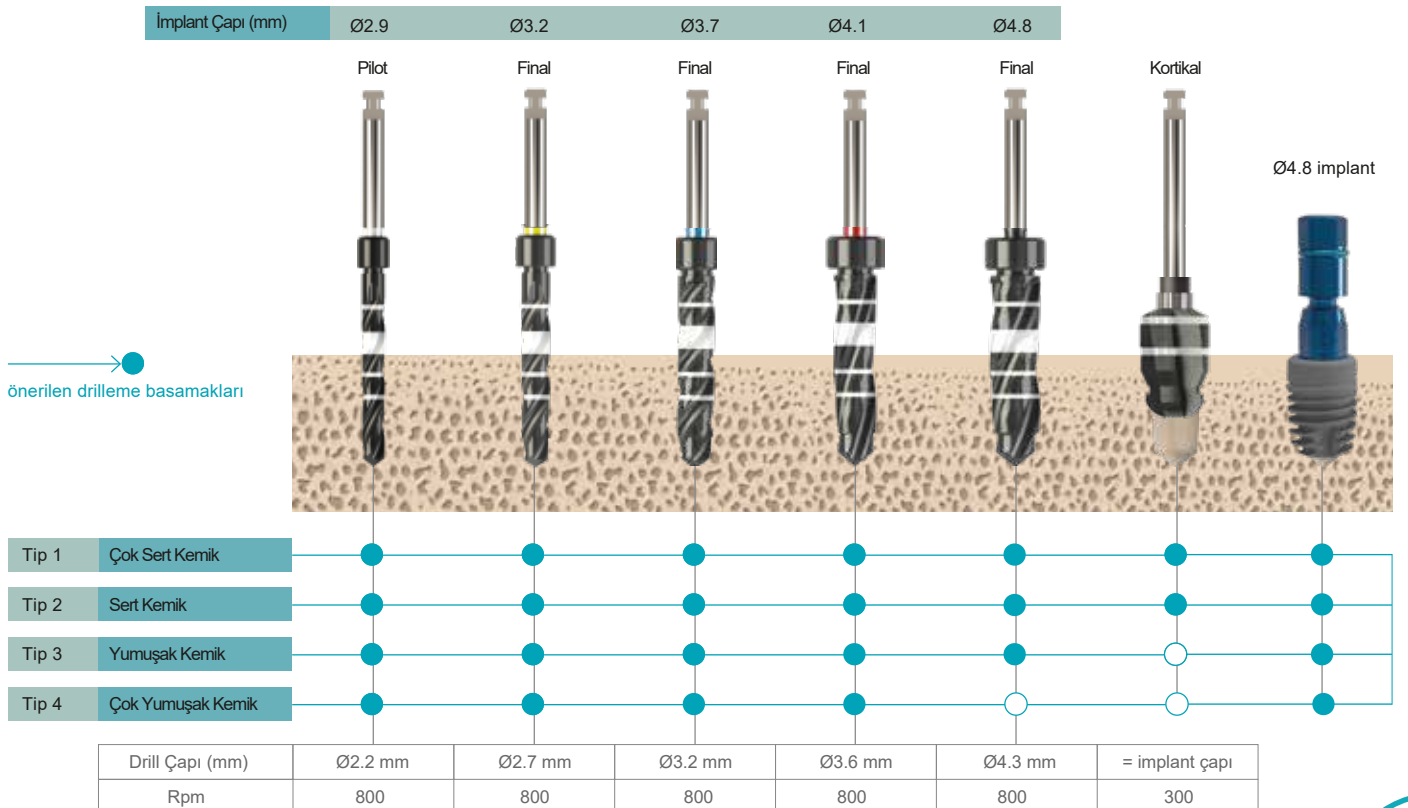

Şekil 1. Kemik tiplerine göre kemik/doku seviyesi implantların yerleştirilmesi için önerilen drilleme prosedürü.

İMLANT PAKETİ KULLANIM TALİMATI



Kutu, üzerindeki delikli kısma bastırılıp yırtılarak açılır.



Blister paket kutudan çıkarılır.



"Open" yazısı dikkate alınarak tyvek kağıt açılır.



İmplant kutusunun kapağı, saatin ters yönünde çevirilerek açılır. Kapakta bulunan güvenlik halkasının kopuk olmamasına dikkat edilmelidir. Güvenlik halkası kopuk olan ürün kullanılmamalıdır.



Kapak açıldıktan sonra, implant steril masa üzerine bırakılır. Masaya bırakılan implantın yabancı bir maddeyle temasını medikal uyumlu plastik gövde korur.



İmplantta monte edilmiş renk kodlu (sarı veya mavi platform) transfer parçasına raşet veya anguldruva ile adaptör takılır. Transfer parçasındaki hassas üretim ve silikon halka sayesinde implant ağıza taşınırken düşmez. İmplantın dik konumda taşınmasına gerek yoktur.



Raşet 90° açı ile aşağı doğru itilerek implant iç kutu gövdesinden ayrılır. İmplant yerleştirildikten sonra transfer parçası pens yardımı ile veya ek araçlar olmadan el ile çıkarılabilir. Transfer parçası, komşu implantların paralel yerleştirilmesi için bir hizalama pini olarak da kullanılabilir. Üzerinde önceden belirlenmiş bir kırılma noktası, implantın iç yapısını korur.



Kutunun içinden çıkan kapama vidasını almak için silikon kapak kaldırılır.



SCS anahtarı kapama vidasına takıldıktan sonra hafifçe bastırılır ve yukarı doğru çekilerek yuvasından çıkarılır.



Gülme, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır.
Arnold Glashow



1. Ölçü alımı ve provaları kolaylaştıran ve hızlandıran 4 köşe bağlantı




4- Vida gevşemesini azaltan ve kuvveti dağıtan konik temas alanı




2. Dayanak vidasının gevşeme ihtimalini azaltan ve uzun dönem stabiliteyi sağlayan 14° konik (morse taper) bağlantı ve soğuk kaynak yüzeyi




5- Boyun bölgesindeki stresi azaltarak krestal kemik kaybını önleyen platform switch özelliği

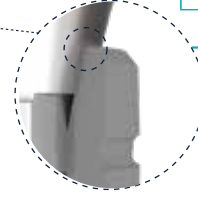

3- Düşük torkta ilerleme sağlayan, kemiğe iletilen kuvveti dağıtan ve primer stabiliteyi arttıran kare yiv tasarımı

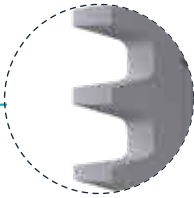

6- Primer stabiliteyi arttıran ve implant yerleştirilmesini kolaylaştıran self- tapping tasarımı

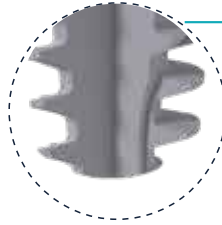

Bilimplant kemik seviyesi implantları doğal bir görünüm ve his için tasarlanmıştır. Pek çok endikasyon için mükemmel esneklik ve dengeli bir protez portföyü sunar. Günlük pratikte mükemmel klinik performans, olağanüstü estetik ve yüksek hasta memnuniyeti anlamına gelir.

Kemik Seviyesi İmplantlar



Ürün Kodu	İmplant Çapı	Uzunluk	
PBL2910	Ø 2.9 mm	10 mm	İnce (TP, M1.4)
PBL2912		12 mm	
PBL2914		14 mm	
PBL3208	Ø 3.2 mm	8 mm	Dar Platform (sarı) (NP, M1.6)
PBL3210		10 mm	
PBL3212		12 mm	
PBL3214	Ø 3.7 mm	14 mm	
PBL3708		8 mm	
PBL3710		10 mm	
PBL3712	Ø 4.1 mm	12 mm	Regular Platform (mavi) (RP, M1.8)
PBL3714		14 mm	
PBL4108		8 mm	
PBL4110	Ø 4.8 mm	10 mm	
PBL4112		12 mm	
PBL4114		14 mm	
PBL4808	Ø 4.8 mm	8 mm	Regular Platform (mavi) (RP, M1.8)
PBL4810		10 mm	
PBL4812		12 mm	

Doku Seviyesi İmplantlar



Ürün Kodu	İmplant Çapı	Uzunluk	Kafa Çapı
PTL4106	Ø 4.1 mm	6 mm	Ø 4,8 mm
PTL4108		8 mm	
PTL4110		10 mm	
PTL4112		12 mm	
PTL4114		14 mm	
PTL4806	Ø 4.8 mm	6 mm	Ø 6 mm
PTL4808		8 mm	
PTL4810		10 mm	
PTL4812		12 mm	

Regular Platform (mavi)
(RP, M1.8)

Ø2.9 mm implant

İ N C E L İ Ğ İ K E Ş F E T



- Dar interdental boşluklar veya azalmış kemik hacmi gibi zorlu endikasyonlar yenilikçi çözümler gerektirir.
- Estetik bölgede daha ince implant kullanımının endike olduğu durumlarda Ø2.9 mm implantın ayrıcalığını yaşayın.
- Kolay kullanım, Dönmeye karşı kesin ve uzun süreli mekanik stabilite, 4 köşe bağlantı, Vida kırığını önleyen 8° konik bağlantı.

Endikasyonlar

Lateral kesiciler (maxilla)



Santral and lateral kesiciler (mandible)

Kemik Seviyesi Ø2.9 İnce (SP) İmplant


SP İmplant Ø2.9



PBL2910	PBL2912	PBL2914	Ürün Kodu
10	12	14	Uzunluk (mm)


İyileşme Başlıkları

D1 x D2	GH	Ürün Kodu
4.2 x 3.2 mm	2.5 mm	BLHCH25SP
	4 mm	BLHCH4SP
	6 mm	BLHCH6SP

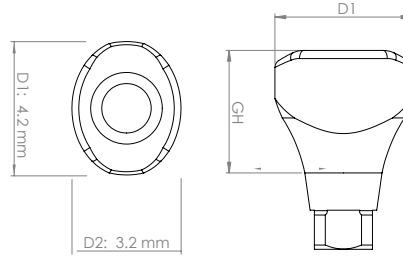

Ø2.9 İmplant için Ti-base Açılı Kron Tipi Dayanaklar

D	GH	Ürün Kodu
3.5 mm	1 mm	BLATIBLAGH1SP
	2 mm	BLATIBLAGH2SP
	3 mm	BLATIBLAGH3SP

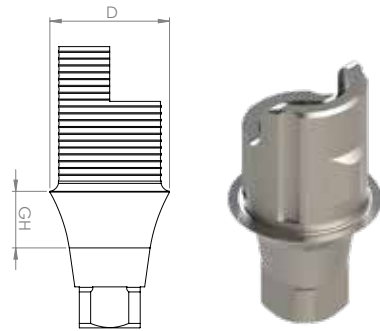

Açık Ölçü Transfer Parçası

Ürün Kodu
IP0021



Kapalı Ölçü Transfer Parçası

Ürün Kodu
IP0023



Analog

Ürün Kodu
IP0025



Kapama Vidaları

Ø3.2 ve Ø3.7 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin
Kapama Vidası

PCSNP



Kemik Seviyesi
Dar Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin
Kapama Vidası

PCSRP



Kemik Seviyesi
Regular Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Doku Seviyesi İmplantlar İçin
Kapama Vidası

PCSTRP




Doku Seviyesi
Regular Platform

İmplantın iç yapısına uyumlu ve sızdırmaz özellikli hassas kapama vidası

Transfer Parçası

Ø3.2 ve Ø3.7 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin


PTPNP

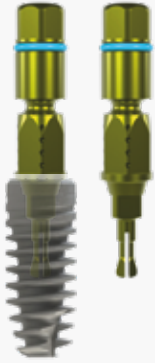

Kemik Seviyesi
Dar Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin


PTPRP

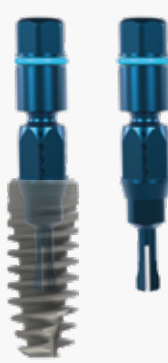

Kemik Seviyesi
Regular Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Doku Seviyesi İmplantlar İçin

PTPRP

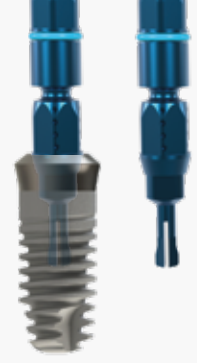


Doku Seviyesi
Regular Platform

Transfer parçası implant yerleştikten sonra kolayca çıkabilen sisteme sahiptir. Ayrıca sert kemikte ortalama 125 Ncm kuvvette kırılan güvenlik halkası mevcuttur. Bu sayede implant iç yüzeyleri korunmuş ve marjinal kemik kaybı önlenmiş olur.


İyileşme Başlıkları (Kemik Seviyesi)

Ø3.2 ve Ø3.7 İmplantlar İçin

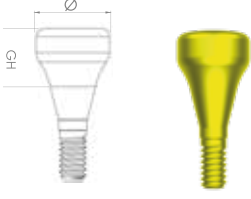

Çap (mm)	Diş Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Ø3.5	3 mm	BLHC35H3NP
Ø3.5	4 mm	BLHC35H4NP
Ø3.5	6 mm	BLHC35H6NP
Ø4.5	3 mm	BLHC45H3NP
Ø4.5	4 mm	BLHC45H4NP
Ø4.5	6 mm	BLHC45H6NP

Ø4.1 ve Ø4.8 İmplantlar İçin

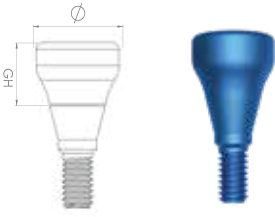

Çap (mm)	Diş Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Ø5.0	3 mm	BLHC50H3RP
Ø5.0	4 mm	BLHC50H4RP
Ø5.0	6 mm	BLHC50H6RP
Ø6.5	3 mm	BLHC65H3RP
Ø6.5	4 mm	BLHC65H4RP
Ø6.5	6 mm	BLHC65H6RP


Vida Tutuculu (Multi-Unit) İyileşme Başlığı



Çap (mm)	Yükseklik (GH)	Ürün Kodu
Ø4.5	4.9 mm	BLHCMLT


İyileşme Başlıkları (Doku Seviyesi)

Ø4.1 İmplantlar İçin

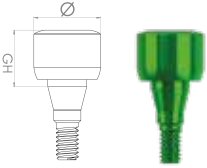

Çap (mm)	Diş Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Ø4.1	2 mm	RNTLHCH2
Ø4.1	4 mm	RNTLHCH4
Ø4.1	6 mm	RNTLHCH6

Ø4.8 İmplantlar İçin

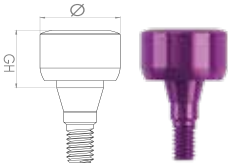

Çap (mm)	Diş Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Ø4.8	2 mm	WNTLHCH2
Ø4.8	4 mm	WNTLHCH4
Ø4.8	6 mm	WNTLHCH6

Vida Tutuculu (Multi-Unit) İyileşme Başlığı
Ø4.1 İmplantlar İçin



Çap (mm)	Yükseklik (GH)	Ürün Kodu
Ø5.45	4.7 mm	RNTLHCMLT

Vida Tutuculu (Multi-Unit) İyileşme Başlığı
Ø4.8 İmplantlar İçin



Çap (mm)	Yükseklik (GH)	Ürün Kodu
Ø6.75	5 mm	WNTLHCMLT

DAYANAKLAR

Tüm dayanaklarda yükleme tork değeri **30 Ncm** dir.


Multi-Unit dayanaklarda da yükleme tork değeri **30 Ncm** olup, ikincil üst vida tork değeri ise **15 Ncm** dir.

Kemik Seviyesi Dayanaklar (Simante)

Kemik
Seviyesi

Düz Dayanaklar

Kemik Seviyesi

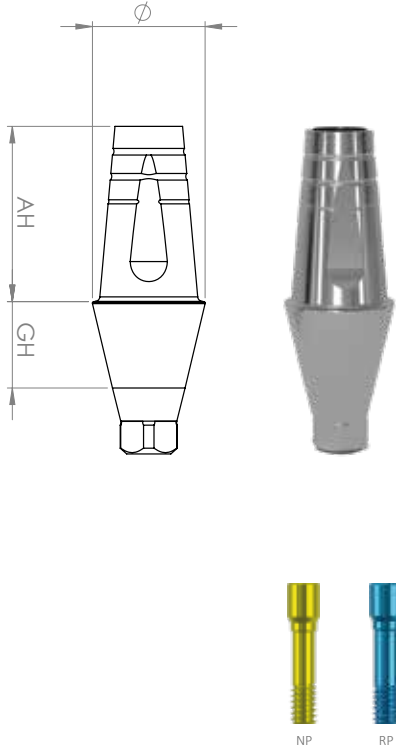


Çap (mm)	Diş Eti Yüksekliği (GH)	AH	Ürün Kodu
Ø3.5	1 mm	5.5 mm	BLSA35GH1AH55NP
Ø3.5	2 mm	5.5 mm	BLSA35GH2AH55NP
Ø3.5	3 mm	5.5 mm	BLSA35GH3AH55NP
Ø3.5	4 mm	5.5 mm	BLSA35GH4AH55NP
Ø3.5	5 mm	5.5 mm	BLSA35GH5AH55NP
Ø4.5	1 mm	7 mm	BLSA45GH1AH7NP
Ø4.5	2 mm	7 mm	BLSA45GH2AH7NP
Ø4.5	3 mm	7 mm	BLSA45GH3AH7NP
Ø4.5	4 mm	7 mm	BLSA45GH4AH7NP
Ø4.5	5 mm	7 mm	BLSA45GH5AH7NP
Ø5	1 mm	7 mm	BLSA50GH1AH7RP
Ø5	2 mm	7 mm	BLSA50GH2AH7RP
Ø5	3 mm	7 mm	BLSA50GH3AH7RP
Ø5	4 mm	7 mm	BLSA50GH4AH7RP
Ø5	5 mm	7 mm	BLSA50GH5AH7RP
Ø6	1 mm	7 mm	BLSA60GH1AH7RP
Ø6	2 mm	7 mm	BLSA60GH2AH7RP
Ø6	3 mm	7 mm	BLSA60GH3AH7RP
Ø6	4 mm	7 mm	BLSA60GH4AH7RP
Ø6	5 mm	7 mm	BLSA60GH5AH7RP

*Tüm dayanak vidalarında klinik ve laboratuvar kullanımının bir arada yapılmasıyla metal yorgunluğu oluşur ve vida kırığı/gevşemesi riski artar. Bu sebeple Bilimplant, klinik kullanımda (nihai dayanak torklaması sırasında) renkli vidaların kullanılmasını, laboratuvar işlemleri ve provalarda ise standart renksiz vidaların kullanılmasını önermektedir.

Açılı Dayanaklar

Kemik Seviyesi

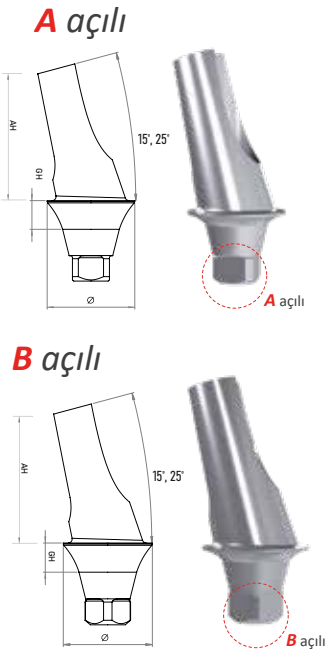

Açı	Diş Eti Y.(GH)	AH	Ürün Kodu A açılı / B açılı
15°	1 mm	7 mm	BLAAA15GH1AH7NP / BLAAB15GH1AH7NP
15°	2 mm	7 mm	BLAAA15GH2AH7NP / BLAAB15GH2AH7NP
15°	3 mm	7 mm	BLAAA15GH3AH7NP / BLAAB15GH3AH7NP
15°	4 mm	7 mm	BLAAA15GH4AH7NP / BLAAB15GH4AH7NP
25°	1 mm	7 mm	BLAAA25GH1AH7NP / BLAAB25GH1AH7NP
25°	2 mm	7 mm	BLAAA25GH2AH7NP / BLAAB25GH2AH7NP
25°	3 mm	7 mm	BLAAA25GH3AH7NP / BLAAB25GH3AH7NP
25°	4 mm	7 mm	BLAAA25GH4AH7NP / BLAAB25GH4AH7NP
15°	1 mm	7 mm	BLAAA15GH1AH7RP / BLAAB15GH1AH7RP
15°	2 mm	7 mm	BLAAA15GH2AH7RP / BLAAB15GH2AH7RP
15°	3 mm	7 mm	BLAAA15GH3AH7RP / BLAAB15GH3AH7RP
15°	4 mm	7 mm	BLAAA15GH4AH7RP / BLAAB15GH4AH7RP
25°	1 mm	7 mm	BLAAA25GH1AH7RP / BLAAB25GH1AH7RP
25°	2 mm	7 mm	BLAAA25GH2AH7RP / BLAAB25GH2AH7RP
25°	3 mm	7 mm	BLAAA25GH3AH7RP / BLAAB25GH3AH7RP
25°	4 mm	7 mm	BLAAA25GH4AH7RP / BLAAB25GH4AH7RP


Tüm açılı simante dayanaklarımızda yerleştirme seçeneğini artırabilmek için dayanağın implant gövdesine göre 8 farklı şekilde oturtulabildiği A ve B açılı tipleri imal edilmiştir. Bu sayede freze ile dayanak düzeltme ihtiyacı azalır.

Doku Seviyesi Dayanaklar (Simante)

Doku
Seviyesi

Düz Dayanak

Doku Seviyesi

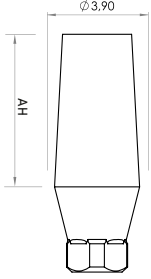

Dayanak Yüksekliği (AH) Ürün Kodu


7 mm

TLAAH7

Açılı Dayanaklar

Doku Seviyesi


A açılı dayanaklar

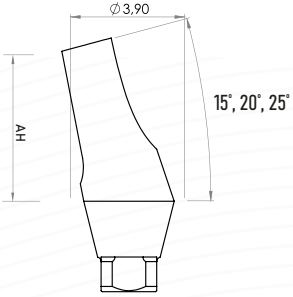

A açılı

Açı	Dayanak Yüksekliği (AH)	Ürün Kodu
15°	7 mm	TLAA15AH7
20°	7 mm	TLAA20AH7
25°	7 mm	TLAA25AH7

B açılı dayanaklar

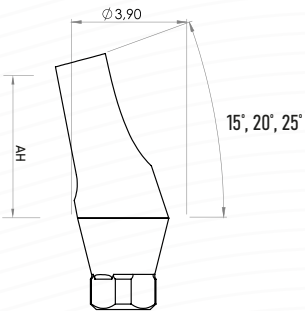


B açılı

Açı	Dayanak Yüksekliği (AH)	Ürün Kodu
15°	7 mm	TLAAB15AH7
20°	7 mm	TLAAB20AH7
25°	7 mm	TLAAB25AH7

Doku
Seviyesi

Geçici Dayanaklar

Kemik Seviyesi

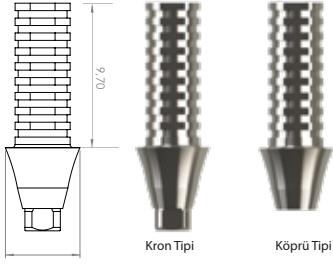


Dar Platform

Regular Platform

Çap (mm)	GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.3	1 mm	9.7mm	BLTAGH1LNP	BLTAGH1NLNP
Ø4.3	2 mm	9.7mm	BLTAGH2LNP	BLTAGH2NLNP
Ø4.3	3 mm	9.7mm	BLTAGH3LNP	BLTAGH3NLNP
Ø4.3	4 mm	9.7mm	BLTAGH4LNP	BLTAGH4NLNP
Ø4.3	5 mm	9.7mm	BLTAGH5LNP	BLTAGH5NLNP
Ø5.0	1 mm	9.7mm	BLTAGH1LRP	BLTAGH1NLRP
Ø5.0	2 mm	9.7mm	BLTAGH2LRP	BLTAGH2NLRP
Ø5.0	3 mm	9.7mm	BLTAGH3LRP	BLTAGH3NLRP
Ø5.0	4 mm	9.7mm	BLTAGH4LRP	BLTAGH4NLRP
Ø5.0	5 mm	9.7mm	BLTAGH5LRP	BLTAGH5NLRP

Doku Seviyesi

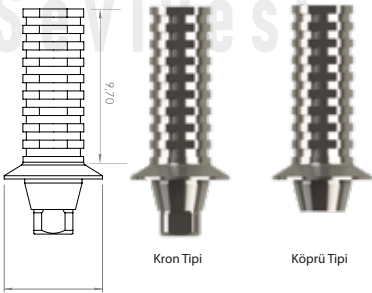

Ø4.1 implantlar için

Ø4.8 implantlar için

Çap (mm)	GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.8	-	9.7mm	RNTLTLOCKA	RNTLTNLOCKA
Ø6.0	-	9.7mm	WNTLTLOCKA	WNTLTNLOCKA

Vida Tutuculu (Multi-unit) Geçici Dayanaklar

Kron

Kemik Seviyesi




Köprü

Kemik Seviyesi



Kron

Doku Seviyesi

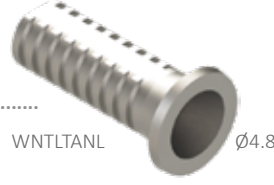

Tüm multi-unit geçici dayanaklarda
AH yüksekliği 9 mm'dir.

Köprü

Doku Seviyesi



Vida Tutuculu (Multi-unit) Dayanaklar

Düz Multi-unit Dayanaklar


Kemik Seviyesi

Plastik Koping



Okluzal Vida

OS
Yükleme Torku 15 Ncm

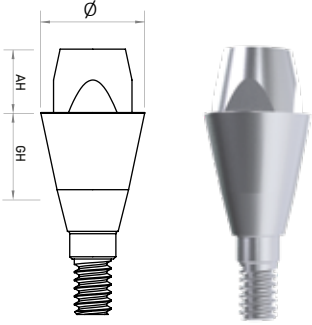

Dar Platform

Regular Platform

Çap (mm)	Diş Eti Yüksekliği (GH)	AH	Ürün Kodu
Ø4.5	1 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH1NP
Ø4.5	2 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH2NP
Ø4.5	3 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH3NP
Ø4.5	4 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH4NP
Ø4.5	5 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH5NP
Ø4.5	1 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH1RP
Ø4.5	2 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH2RP
Ø4.5	3 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH3RP
Ø4.5	4 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH4RP
Ø4.5	5 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH5RP

Düz Multi-unit Dayanak

Doku Seviyesi

Ürün Kodu


TLMLTSAH55




Vida Tutuculu (Multi-unit) Dayanaklar

Açılı Multi-unit Dayanaklar

Kemik Seviyesi

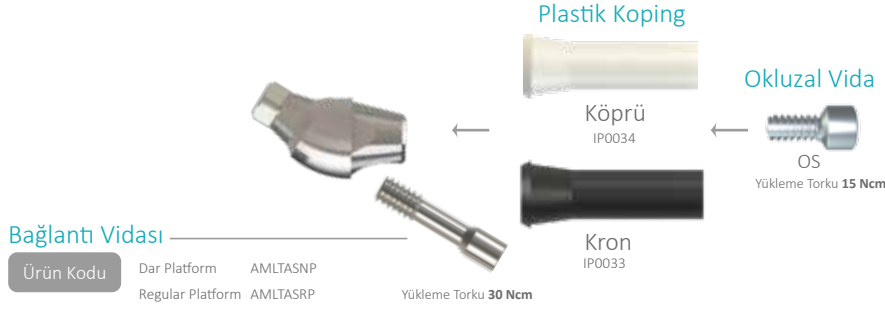

A açılı dayanaklar

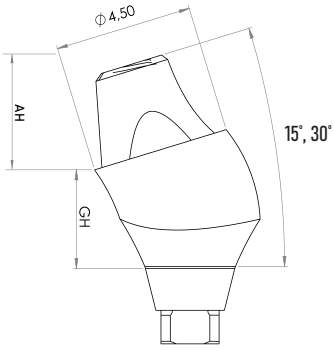


Dar Platform

Regular Platform

A açılı

Açı	Diş Eti Yüksekliği (GH)	AH	Ürün Kodu
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH1NP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH2NP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH3NP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH4NP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH1NP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH2NP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH3NP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH4NP
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH1RP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH2RP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH3RP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH4RP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH1RP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH2RP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH3RP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH4RP

B açılı dayanaklar

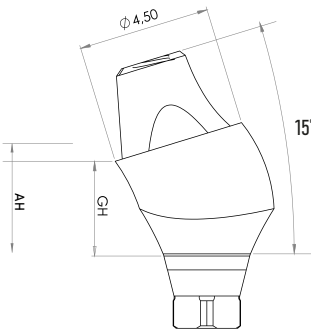

Dar Platform

Regular Platform

B açılı

Açı	Diş Eti Yüksekliği (GH)	AH	Ürün Kodu
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH1NP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH2NP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH3NP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH4NP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH1NP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH2NP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH3NP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH4NP
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH1RP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH2RP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH3RP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH4RP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH1RP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH2RP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH3RP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH4RP

LOC-BIL[®] Tutucu Sistem

İmplant destekli overdenture protezler için üretilmiş bu bağlantı, size ve hastanıza özel olarak tasarlandı. Rahatlığı ve güvenilirliği hissedin



DLC YÜZEY

DLC kaplı hassas tutuculu dayanaklar, çizilmez yüzey sertliği ve pürüzsüzlüğü sayesinde bakteri plağı ve diş taşı birikimini minimumda tutar. Dayanağın ve matris tutucuların aşınmasını engeller.



AÇISAL SAPMANIN TELAFİSİ

Açılı Loc-bil dayanaklarla kombinasyonu, implantlar arasında 70°'ye kadar açılanmaları telafi eder

DIŞ ETİ YÜKSEKLİKLERİ

Düz ve açılı Loc-bil dayanaklar için 5 farklı diş eti yükseklik seçeneği vardır

PEEK MATRİKSİLER

PEEK (polietereterketon) matrisleri, hem düz hem de eğimli implantlarda 30.000'den fazla kullanım için uzun süreli tutuculuk sağlamaktadır

Kemik Seviyesi Düz ve 15° Açılı Loc-bil® Dayanaklar



Doku Seviyesi Düz ve 15° Açılı Loc-bil® Dayanaklar



*Tüm açılı Loc-bil dayanakların implanta 8 farklı konumda oturtulabildiği A ve B açılı tipleri mevcuttur.



PERFORMANS

Yüksek aşınma direnci ve pürüzsüzlük sağlayan mükemmel malzeme



ESNEKLİK

Kötü pozisyonlu implantları telafi etme esnekliği



KULLANILABİLİRLİK

Kilit sisteminin tüm bileşenlerinin kullanımı kolaydır



HASTA KONFORU

Hastanız için diğer hibrit sistemlere göre çok daha fazla konfor sağlar




KALİTE

Loc-bil® kalitesine ve bilime güvenin

Hassas Tutuculu (Locator) Dayanaklar

Düz Dayanaklar

Kemik Seviyesi

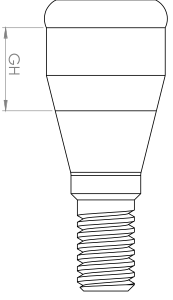


	Dış Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Dar Platform	2 mm	BLOCGH2NP
	3 mm	BLOCGH3NP
	4 mm	BLOCGH4NP
	5 mm	BLOCGH5NP
	6 mm	BLOCGH6NP
	2 mm	BLOCGH2RP
Regular Platform	3 mm	BLOCGH3RP
	4 mm	BLOCGH4RP
	5 mm	BLOCGH5RP
	6 mm	BLOCGH6RP

Açılı Dayanaklar


Kemik Seviyesi

A açılı dayanaklar

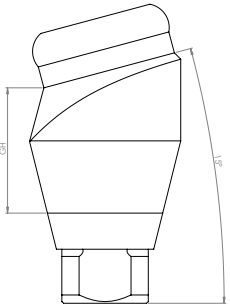

	Açı	Dış Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Dar Platform	15°	2 mm	BLOCA15GH2NP
	15°	3 mm	BLOCA15GH3NP
	15°	4 mm	BLOCA15GH4NP
	15°	5 mm	BLOCA15GH5NP
	15°	6 mm	BLOCA15GH6NP
	15°	2 mm	BLOCA15GH2RP
Regular Platform	15°	3 mm	BLOCA15GH3RP
	15°	4 mm	BLOCA15GH4RP
	15°	5 mm	BLOCA15GH5RP
	15°	6 mm	BLOCA15GH6RP

B açılı dayanaklar

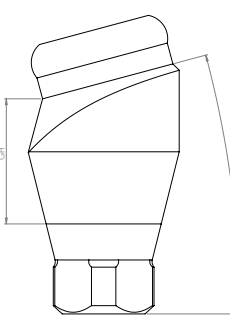

	Açı	Dış Eti Yüksekliği (GH)	Ürün Kodu
Dar Platform	15°	2 mm	BLOCB15GH2NP
	15°	3 mm	BLOCB15GH3NP
	15°	4 mm	BLOCB15GH4NP
	15°	5 mm	BLOCB15GH5NP
	15°	6 mm	BLOCB15GH6NP
	15°	2 mm	BLOCB15GH2RP
Regular Platform	15°	3 mm	BLOCB15GH3RP
	15°	4 mm	BLOCB15GH4RP
	15°	5 mm	BLOCB15GH5RP
	15°	6 mm	BLOCB15GH6RP

Loc-bil® matriks sistemi, yeni geliştirilen teknolojisiyle, çıkarılabilir restorasyonları locator dayanaklar üzerinde tutmak için geliştirilmiş prefabrike bir konektördür. Matris sistemi titanyum muhafaza + renkli PEEK olarak mevcuttur. Loc-bil® dayanak ile birlikte matriks sistemi etkileyici bir hizmet ömrüne ve işlevselliğe sahiptir.

Kolay Kullanım

PEEK tutucular, metal housing içersine birkaç saniye içerisinde kolaylıkla takılıp çıkarılabilirler.




PEEK Tutucular Tüm Popüler İmplant Locator Sistemleriyle Uyumludur*



Hafif
1130 g



Orta
1820 g

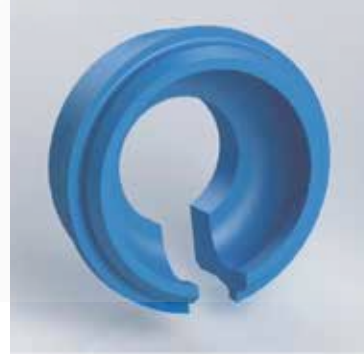


Güçlü
2260 g

Hassas Tutuculu (Locator) Dayanaklar

Düz Dayanaklar

Doku Seviyesi

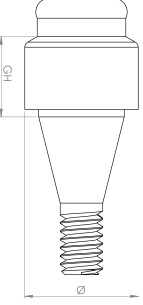

Ø4.1 implantlar için

Ø4.8 implantlar için

Diş Eti Yüksekliği (GH)


Ürün Kodu

2 mm	RNTLOC GH2
3 mm	RNTLOC GH3
4 mm	RNTLOC GH4
5 mm	RNTLOC GH5
6 mm	RNTLOC GH6
2 mm	WNTLOC GH2
3 mm	WNTLOC GH3
4 mm	WNTLOC GH4
5 mm	WNTLOC GH5
6 mm	WNTLOC GH6

Açılı Dayanaklar

Doku Seviyesi

A açılı dayanaklar

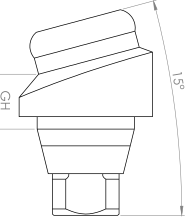

A açılı

Ø4.1 implantlar için

Ø4.8 implantlar için


Açı

Diş Eti Yüksekliği (GH)

Ürün Kodu

15°	2 mm	RNTLOCA15GH2
15°	3 mm	RNTLOCA15GH3
15°	4 mm	RNTLOCA15GH4
15°	5 mm	RNTLOCA15GH5
15°	6 mm	RNTLOCA15GH6
15°	2 mm	WNTLOCA15GH2
15°	3 mm	WNTLOCA15GH3
15°	4 mm	WNTLOCA15GH4
15°	5 mm	WNTLOCA15GH5
15°	6 mm	WNTLOCA15GH6

B açılı dayanaklar

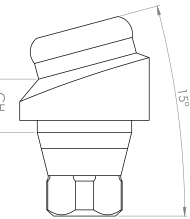

B açılı

Ø4.1 implantlar için

Ø4.8 implantlar için

Açı

Diş Eti Yüksekliği (GH)

Ürün Kodu

15°	2 mm	RNTLOCB15GH2
15°	3 mm	RNTLOCB15GH3
15°	4 mm	RNTLOCB15GH4
15°	5 mm	RNTLOCB15GH5
15°	6 mm	RNTLOCB15GH6
15°	2 mm	WNTLOCB15GH2
15°	3 mm	WNTLOCB15GH3
15°	4 mm	WNTLOCB15GH4
15°	5 mm	WNTLOCB15GH5
15°	6 mm	WNTLOCB15GH6


TİTANYUM TABANLI (Ti-BASE) DAYANAKLAR

Multi-unit Üzeri Ti-Base Dayanaklar

Kemik
Seviyesi

Kron

Kemik Seviyesi

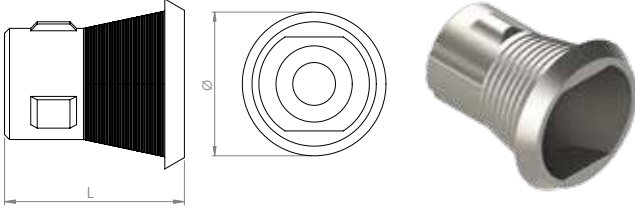

Yükseklik (L)

Ürün Kodu

3.5 mm


BLSMLTIBLAH35

5.5 mm

BLSMLTIBLAH55

Köprü

Kemik Seviyesi

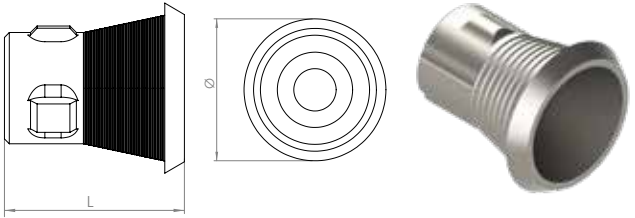

Yükseklik (L)

Ürün Kodu

3.5 mm

BLSMLTIBNLAH35


5.5 mm

BLSMLTIBNLAH55

Kron

Doku Seviyesi

Doku
Seviyesi

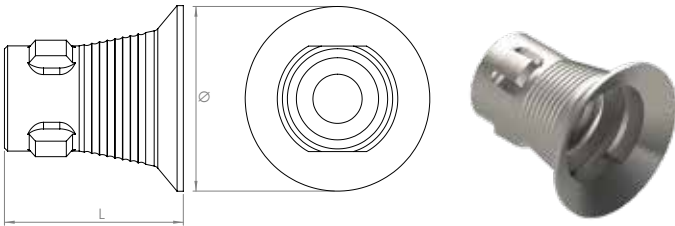

Çap (Ø)

Yükseklik (L)

Ürün Kodu

Ø4.1 implant için

Ø4.8 mm

3.5 mm

RNTLSMLTBLAH35

Ø4.8 mm

5.5 mm

RNTLSMLTBLAH55

Ø4.8 implant için

Ø6 mm

3.5 mm

WNTLSMLTBLAH35


Ø6 mm

5.5 mm

WNTLSMLTBLAH55

Köprü

Doku Seviyesi

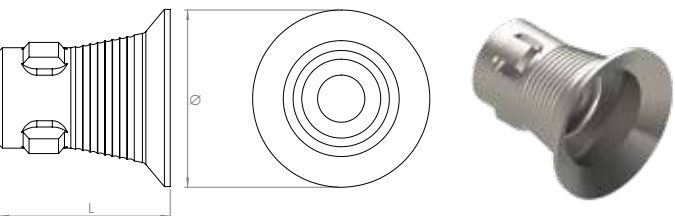

Çap (Ø)

Yükseklik (L)

Ürün Kodu

Ø4.1 implant için

Ø4.8 mm

3.5 mm

RNTLSMLTBNLAH35

Ø4.8 mm

5.5 mm

RNTLSMLTBNLAH55

Ø4.8 implant için

Ø6 mm

3.5 mm

WNTLSMLTBNLAH35

Ø6 mm


5.5 mm

WNTLSMLTBNLAH55

Kron

Düz

Kemik Seviyesi

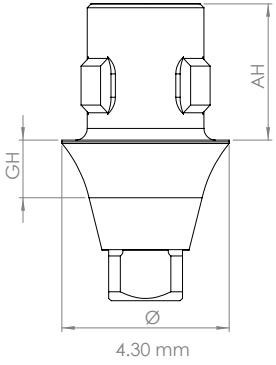

Dar Platform

Regular Platform

Dış Eti Yüksekliği (GH) Baca Yüksekliği (AH) Ürün Kodu


1 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH1NP
2 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH2NP
3 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH3NP
4 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH4NP
5 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH5NP
1 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH1NP
2 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH2NP
3 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH3NP
4 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH4NP
5 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH5NP

1 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH1RP
2 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH2RP
3 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH3RP
4 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH4RP
5 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH5RP
1 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH1RP
2 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH2RP
3 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH3RP
4 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH4RP
5 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH5RP

Köprü

Düz

Kemik Seviyesi

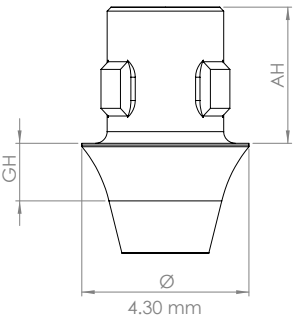

Dar Platform

Regular Platform

Dış Eti Yüksekliği (GH) Baca Yüksekliği (AH) Ürün Kodu


1 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH1NP
2 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH2NP
3 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH3NP
4 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH4NP
5 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH5NP
1 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH1NP
2 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH2NP
3 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH3NP
4 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH4NP
5 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH5NP

1 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH1RP
2 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH2RP
3 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH3RP
4 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH4RP
5 mm	3.5 mm	BLSTIBNLAH35GH5RP
1 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH1RP
2 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH2RP
3 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH3RP
4 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH4RP
5 mm	5.5 mm	BLSTIBNLAH55GH5RP

Kron

Açılı

Kemik Seviyesi

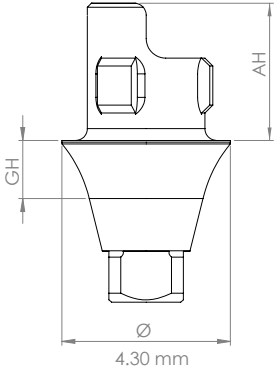

Dar Platform



Regular Platform



Diş Eti Yüksekliği (GH) Baca Yüksekliği (AH) Ürün Kodu

1 mm 3.5 mm BLATIBLAH35GH1NP

1 mm 5.5 mm BLATIBLAH55GH1NP


1 mm 3.5 mm BLATIBLAH35GH1RP

1 mm 5.5 mm BLATIBLAH55GH1RP

Köprü

Açılı

Kemik Seviyesi

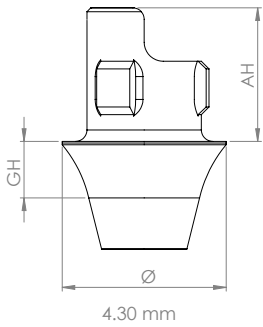

Dar Platform



Regular Platform



Diş Eti Yüksekliği (GH) Baca Yüksekliği (AH) Ürün Kodu

1 mm 3.5 mm BLATIBNLAH35GH1NP

1 mm 5.5 mm BLATIBNLAH55GH1NP

1 mm 3.5 mm BLATIBNLAH35GH1RP


1 mm 5.5 mm BLATIBNLAH55GH1RP

Ti-Base Düz Dayanaklar

Kron

Düz

Doku Seviyesi

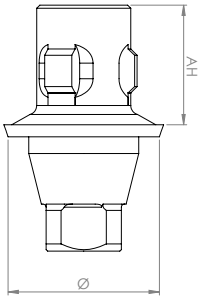


	Çap (Ø)	Baca Yüksekliği (AH)	Ürün Kodu
Ø4.1 implant için RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLSTIBLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLSTIBLAH55
Ø4.8 implant için WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLSTIBLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLSTIBLAH55

RN (regular neck) : Doku seviyesi ti-base dayanaklarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.
WN (wide neck) : Doku seviyesi ti-base dayanaklarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.

Köprü

Düz

Doku Seviyesi

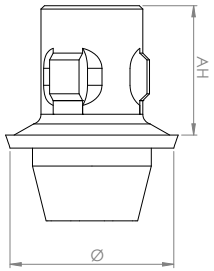

	Çap (Ø)	Baca Yüksekliği (AH)	Ürün Kodu
Ø4.1 implant için RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLSTIBNLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLSTIBNLAH55
Ø4.8 implant için WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLSTIBNLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLSTIBNLAH55

Dijital Tarama Parçaları



Tarama Parçası

Materyal: Titanyum Grade V, özel kaplama

Tarama Parçaları	Ürün Kodu
M1.4 (Ø 2.9 kemik seviyesi implant)	SB016
M1.6 (NP, Ø3.2-Ø3.7 kemik seviyesi implantlar)	SB011
M1.8 (RP, Ø4.1-Ø4.8 kemik ve doku seviyesi implantlar)	SB012



Multi-unit Tarama Parçası


Multi-unit Tarama Parçaları	Ürün Kodu
Kemik seviyesi implantlar, Multi-unit (NP&RP)	SB013
Ø4.1 doku seviyesi implant, Multi-Unit (RP)	SB014
Ø4.8 doku seviyesi implant, Multi-Unit (RP)	SB015

Ti-Base Açılı Dayanaklar

Kron

Doku Seviyesi

Açılı

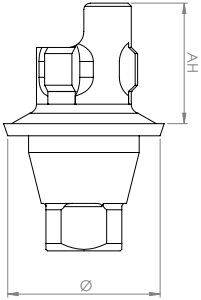


	Çap (Ø)	Baca Yüksekliği (AH)	Ürün Kodu
Ø4.1 implant için RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLATIBLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLATIBLAH55
Ø4.8 implant için WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLATIBLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLATIBLAH55

RN (regular neck) : Doku seviyesi ti-base dayanaklarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.
WN (wide neck) : Doku seviyesi ti-base dayanaklarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.

Köprü


Doku Seviyesi

Açılı

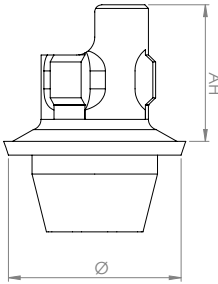

	Çap (Ø)	Baca Yüksekliği (AH)	Ürün Kodu
Ø4.1 implant için RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLATIBNLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLATIBNLAH55
Ø4.8 implant için WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLATIBNLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLATIBNLAH55

Dijital Analoglar

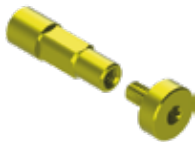

BL (NP, M1.6)
IP0059



BL (RP, M1.8)
IP0060



BL (multi-unit, NP & RP)
IP0061



TL (Ø4.1, RN)
IP0064



TL (Ø4.8, WN)
IP0065



TL (multi-unit, Ø4.1 RN)
IP0066



TL (multi-unit, Ø4.8 WN)
IP0067

BL : Kemik Seviyesi
TL : Doku Seviyesi
NP : Dar Platform (M1.6) (Ø3.2 - Ø3.7 implant platformu)
RP : Regular Platform (M1.8) (Ø4.1 - Ø4.8 implant platformu)


RN (regular neck) : Doku seviyesi dijital analoglarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.
WN (wide neck) : Doku seviyesi dijital analoglarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.

PRE-MILL DAYANAKLAR

Pre-mill Dayanaklar, stok (fabrikasyon) dayanakların çözüm olmadığı durumlarda kişiye özgü dayanak oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Pre-mill Dayanaklar

Kemik Seviyesi

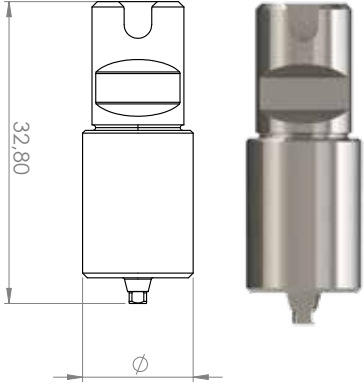


Platform

Çap(mm)

Ürün Kodu

Dar (Ø 3.2- Ø 3.7 mm implantlar için)	Ø12	BLPRA12NP
Dar (Ø 3.2- Ø 3.7 mm implantlar için)	Ø16	BLPRA16NP
Regular (Ø 4.1- Ø 4.8 mm implantlar için)	Ø12	BLPRA12RP
Regular (Ø 4.1- Ø 4.8 mm implantlar için)	Ø16	BLPRA16RP
İnce (Ø 2.9 mm implantlar için)	Ø12	BLPRA12SP
İnce (Ø 2.9 mm implantlar için)	Ø16	BLPRA16SP

Doku Seviyesi

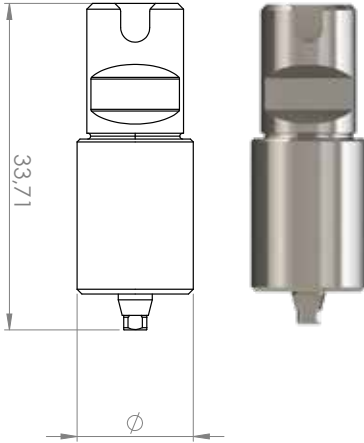

Platform

Çap(mm)

Ürün Kodu


Regular (Ø4.1 mm implant için)	Ø12	RNTLPRA12
Regular (Ø4.8 mm implant için)	Ø12	WNTLPRA12
Regular (Ø4.1 mm implant için)	Ø16	RNTLPRA16
Regular (Ø4.8 mm implant için)	Ø16	WNTLPRA16



İMPLANT SEVİYESİ ÖLÇÜ PARÇALARI VE ANALOGLAR


Ölçü Parçaları ve Analoglar Kemik Seviyesi

Açık Ölçü Postu (Transfer Parçası)

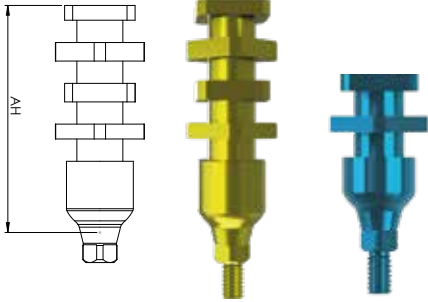

	Yükseklik (AH)	Ürün Kodu
Dar Platform	8.5 mm (kısa)	IP0013
	15 mm (uzun)	IP0001
Regular Platform	8.5 mm (kısa)	IP0015
	15 mm (uzun)	IP0003

Kapalı Ölçü Postu (Transfer Parçası)

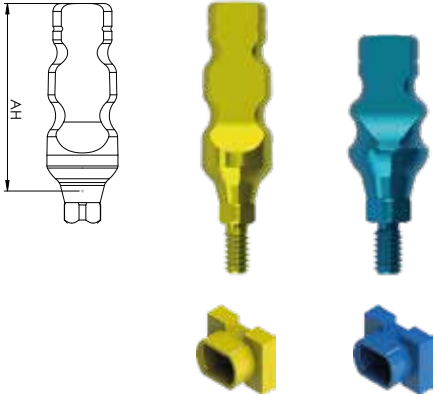

	Yükseklik (AH)	Ürün Kodu
Dar Platform	9 mm (kısa)	IP0017
	12 mm (uzun)	IP0005
Regular Platform	9 mm (kısa)	IP0019
	12 mm (uzun)	IP0007

Ürün Kodu
IP0009

Ürün Kodu
IP0010

Kapalı Ölçü Postu (Transfer Parçası) Plastiği

Analoglar



Ürün Kodu
IP0011

Dar Platform



Ürün Kodu
IP0012

Regular Platform



Ürün Kodu
IP0057

Hassas Tutuculu Dayanak
(Locator) Analogu*



Ürün Kodu
IP0058

Hassas Tutuculu Dayanak
(Locator) Ölçü Postu*

*Hem kemik seviyesi hem de doku seviyesi implantlar için Locbil dayanaklarla birlikte kullanılmaktadır.





“Zamana yenilmeyen tek şey kalitedir.”

Ölçü Parçaları ve Analoglar

Doku Seviyesi

Açık Ölçü Postu (Transfer Parçası)

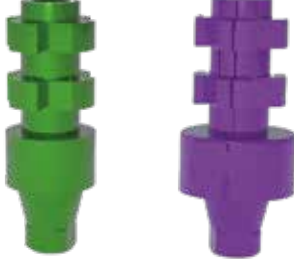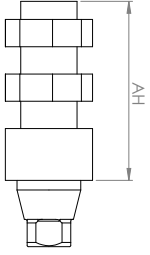

Ø4.1 implant için
Ø4.8 implant için

Yükseklik (AH)

Ürün Kodu


9.5 mm

IP0035

9.5 mm

IP0037

Kapalı Ölçü Postu (Transfer Parçası)

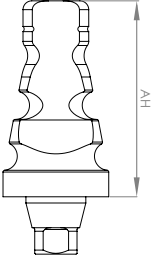

Ø4.1 implant için
Ø4.8 implant için

Yükseklik (AH)

Ürün Kodu

10.5 mm

IP0039

10.5 mm

IP0041



Kapalı Ölçü Postu (Transfer Parçası) Plastiği

Ürün Kodu
IP0010

Analog



Ürün Kodu
IP0043

Ø4.1 implant için



Ürün Kodu
IP0044

Ø4.8 implant için

DAYANAK SEVİYESİ ÖLÇÜ PARÇALARI VE ANALOGLAR

Vida Tutuculu (Multi-unit) Ölçü Parçaları ve Analoglar Kemik Seviyesi

Açık Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0026



Kapalı Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0028



Plastik Koping

Ürün Kodu IP0033



Plastik Koping

Ürün Kodu IP0034



*Düz Analog

Ürün Kodu IP0030



*15° Açılı Analog

Ürün Kodu IP0031



*Açılı ve düz analog platformları tamamen aynıdır ve biri diğerinin yerine kullanılabilir. (NP&RP)

Doku Seviyesi

Ø4.1 Açık Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0045



Ø4.8 Açık Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0047



Ø4.1 Kapalı Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0049



Ø4.8 Kapalı Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0051



Köprü



Köprü



Ø4.1 Analog

Ürün Kodu IP0053

Ø4.8 Analog

Ürün Kodu IP0054

Ø4.1 Plastik Koping

Ürün Kodu IP0055

Ø4.8 Plastik Koping

Ürün Kodu IP0056

ALETLER VE AKSESUARLAR

Cerrahi Set



Ürün Kodu CERS

Danışman ekibimiz tarafından profesyonelce hazırlanmış olan cerrahi set ve içeriği polyphenylsulfone (PPSU) malzemeden üretilmiş olup, tüm hekimlerin kolayca kullanabileceği ve cerrahi işlem sırasında tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Materyal : PPSU

CERRAHİ SET İÇERİĞİ

Aksesuarlar



İşaretleme (Sivri)

Ürün Kodu

PDSS

İşaretleme (Yuvarlak)

PDRB

Drill Uzatma

DEXT



Hizalayıcı Pin

100AP



Ø 3.2 Paralel Pin

101PP



Ø 3.7 Paralel Pin

102PP



Ø 4.1 Paralel Pin

103PP



Ø 4.8 Paralel Pin

104PP



Raşet Adaptörü (Uzun, 24 mm)

TSP24



Raşet Adaptörü (Orta, 19 mm)

TSP19



Raşet Adaptörü (Kısa, 12 mm)

TSP12



Anguldruva Adaptörü

TSPA21



SCS Anahtarı (Uzun, 28 mm)

SCSA28



SCS Anahtarı (Orta, 23 mm)

SCSA23



SCS Anahtarı (Kısa, 16 mm)

SCSA16



SCS Anahtarı (Açılı)

ASCSA



İmplant Çıkartma Anahtarı (SP, Ø 2.9 mm)

IDPSP



İmplant Çıkartma Anahtarı (NP)


IDPNP



İmplant Çıkartma Anahtarı (RP)

IDPRP

Driller

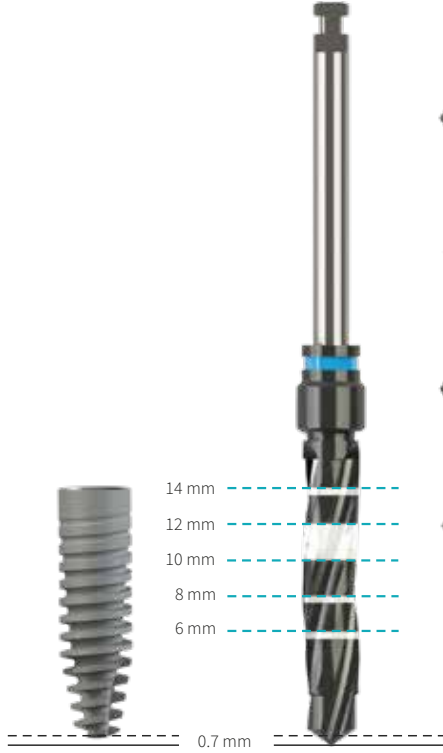

Pilot (Kısa)

Ø2.35

Ø2.9 Final

PD22



Pilot (Uzun)

Ø2.35

Ø2.9 Final

PDL22



Kısa

Ø2.7

Ø3.2 Final

ID32



Uzun

Ø2.7

Ø3.2 Final

IDL32



Kısa

Ø3.2

Ø3.7 Final

ID37



Uzun

Ø3.2

Ø3.7 Final

IDL37



Kısa

Ø3.6

Ø4.1 Final

ID41



Uzun

Ø3.6

Ø4.1 Final

IDL41



Kısa

Ø4.3

Ø4.8 Final

ID48



Uzun

Ø4.3

Ø4.8 Final

IDL48



Kortikal

Ø2.9

Ø2.9

CD29



Kortikal

Ø3.2

Ø3.2

CD32



Kortikal

Ø3.7

Ø3.7

CD37



Kortikal

Ø4.1

Ø4.1

CD41



Kortikal

Ø4.8

Ø4.8

CD48



Profil Oluşturucu

Ø4.8

Ø4.1- Ø4.8

BLPORP



Profil Oluşturucu

Ø4.8

Ø3.2- Ø3.7

BLPONP

Derinlik Ölçer

Ürün Kodu:

DG



Torklu Raşet

Ürün Kodu:

TRCHTV2



Tornavida

Ürün Kodu:

HS

Gode

Ürün Kodu:

GD



STOPPER KIT


Ürün Kodu DSK



İmplant	Ø 3.2	Boy Çap Ürün Kodu					
			14mm	12mm	10mm	8mm	6mm
			Ø3.2	Ø3.2	Ø3.2	Ø3.2	Ø3.2
			DS3214	DS3212	DS3210	DS3208	DS3206
Ø 3.7	Ø 3.7	Boy Çap Ürün Kodu					
			14mm	12mm	10mm	8mm	6mm
			Ø3.7	Ø3.7	Ø3.7	Ø3.7	Ø3.7
			DS3714	DS3712	DS3710	DS3708	DS3706
Ø 4.1	Ø 4.1	Boy Çap Ürün Kodu					
			14mm	12mm	10mm	8mm	6mm
			Ø4.1	Ø4.1	Ø4.1	Ø4.1	Ø4.1
			DS4114	DS4112	DS4110	DS4108	DS4106
Ø 4.8	Ø 4.8	Boy Çap Ürün Kodu					
			14mm	12mm	10mm	8mm	6mm
			Ø4.8	Ø4.8	Ø4.8	Ø4.8	Ø4.8
			DS4814	DS4812	DS4810	DS4808	DS4806

SİNÜS OSTEOTOM KİTİ

Ürün Kodu OSK

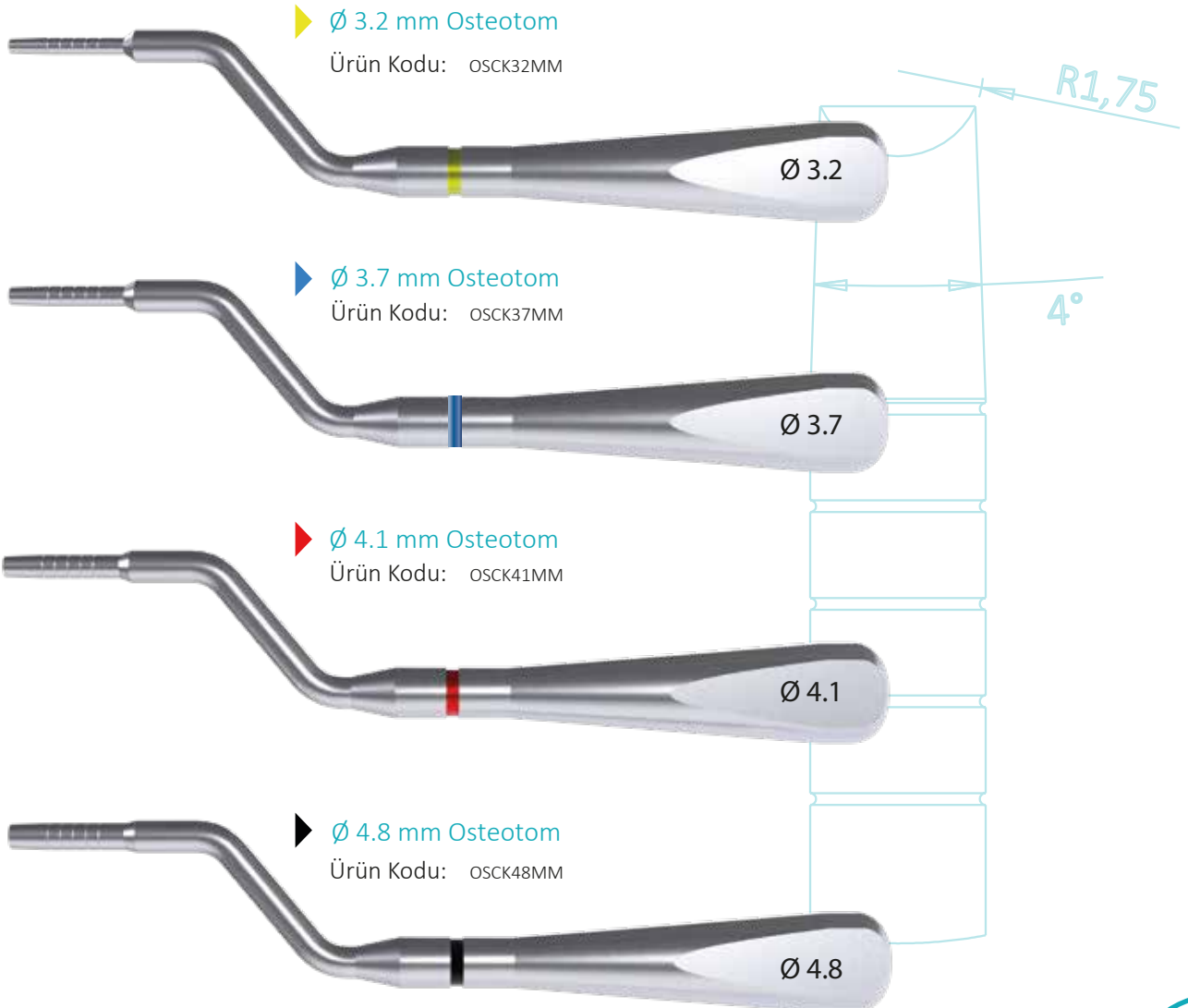


PROTETİK KİT

Ürün Kodu PROK

Locator Anahtarı

Ürün Kodu LCTRA

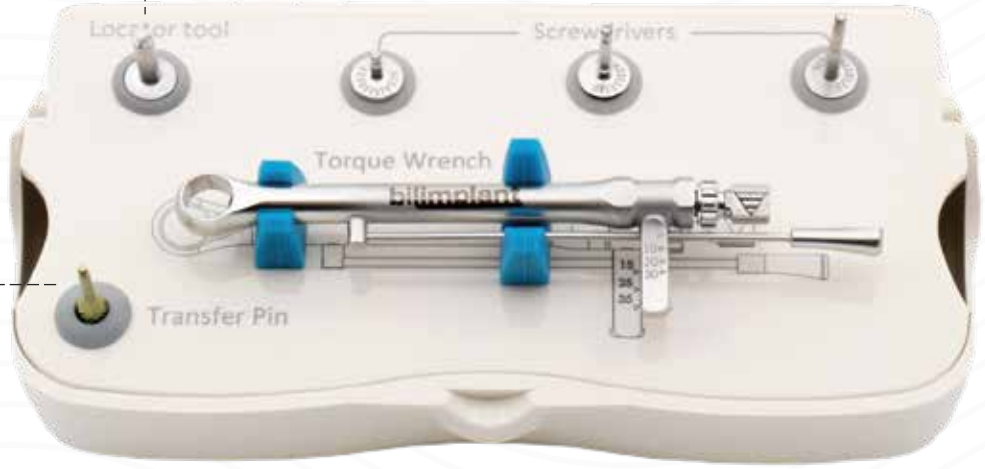

Transfer Pin (Multi-Unit Taşıyıcı)

Ürün Kodu TPM14



KEMİK GENİŞLETME KİTİ

Ürün Kodu RSK

Genişletici Drill


Ürün Kodu RSD24

Genişletici Drill

Ürün Kodu RSD3

Genişletici Drill

Ürün Kodu RSD35

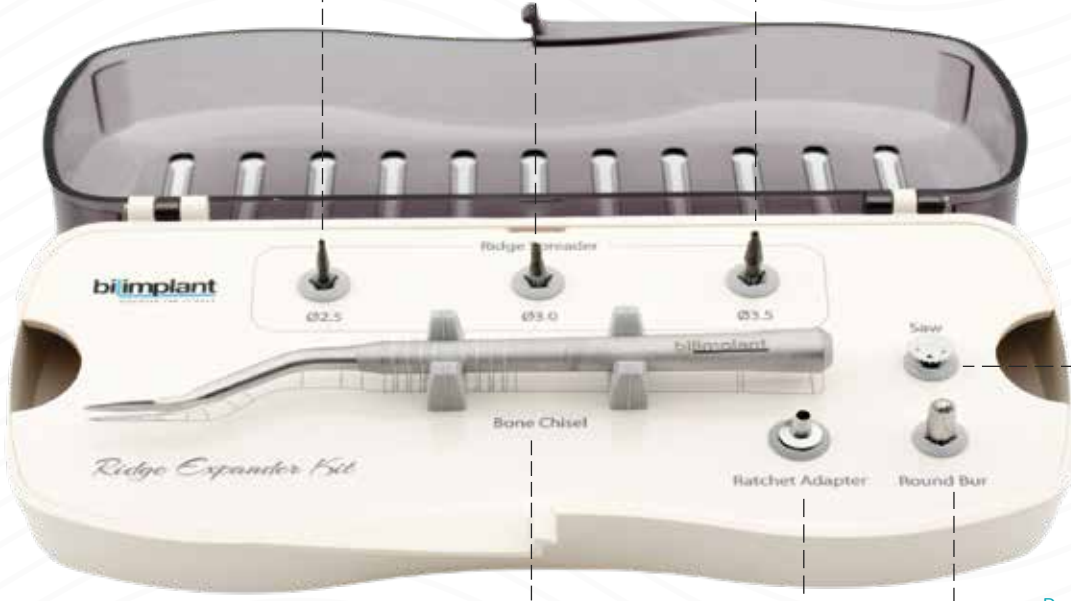

Testere

Ürün Kodu RSK002

Round Frez

Ürün Kodu RSK001

Genişletici Osteotom

Ürün Kodu RSK004


Raşet Adaptörü

Ürün Kodu TSP14



VİDA ÇIKARMA KİTİ


Ürün Kodu SRK

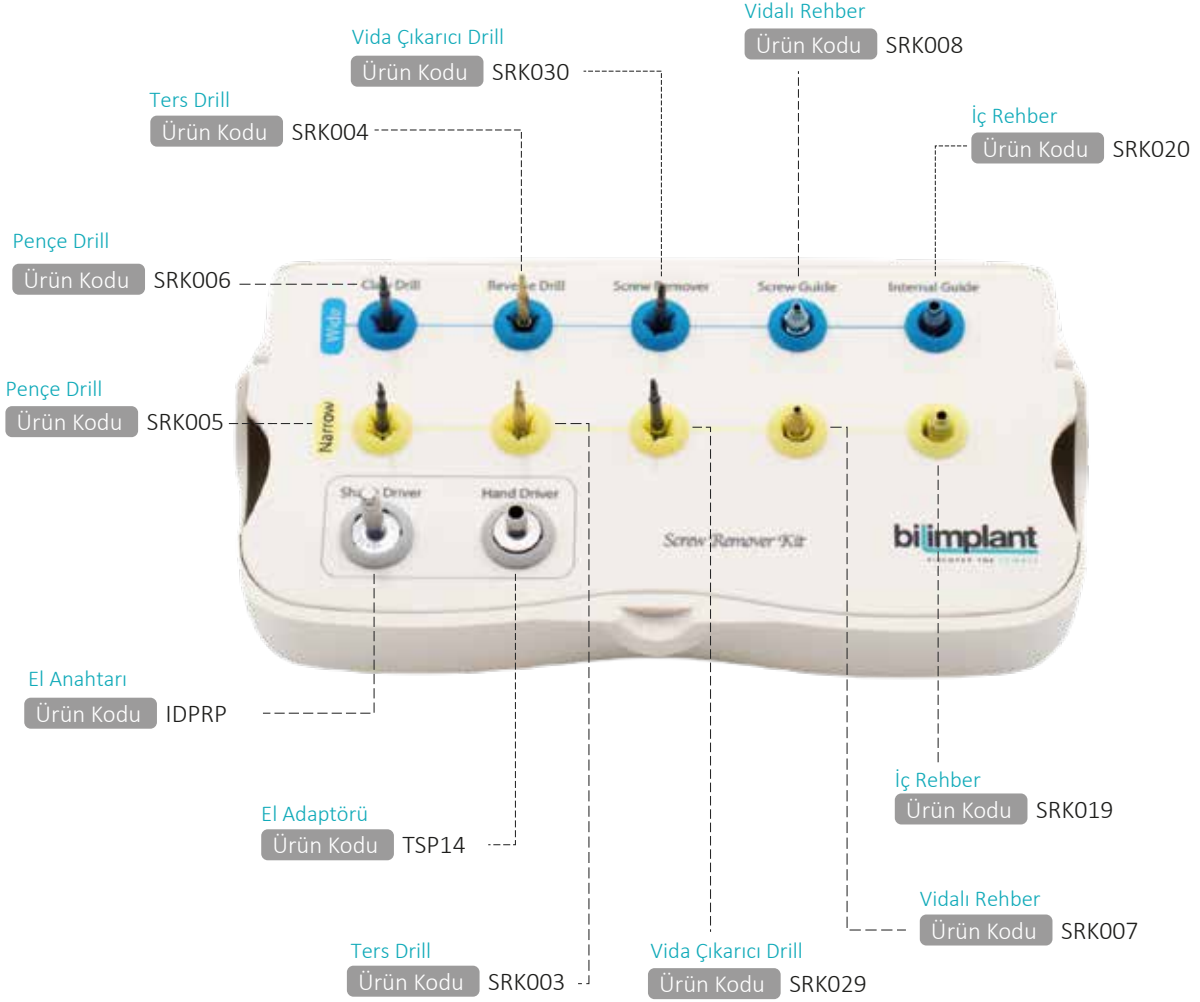

Doğru kullanım için lütfen vida çıkartma kit kullanım kılavuzunu okuyunuz.

ALL ON FOUR & DAYANAK SEÇİM KİTİ

Ürün Kodu AOFASK

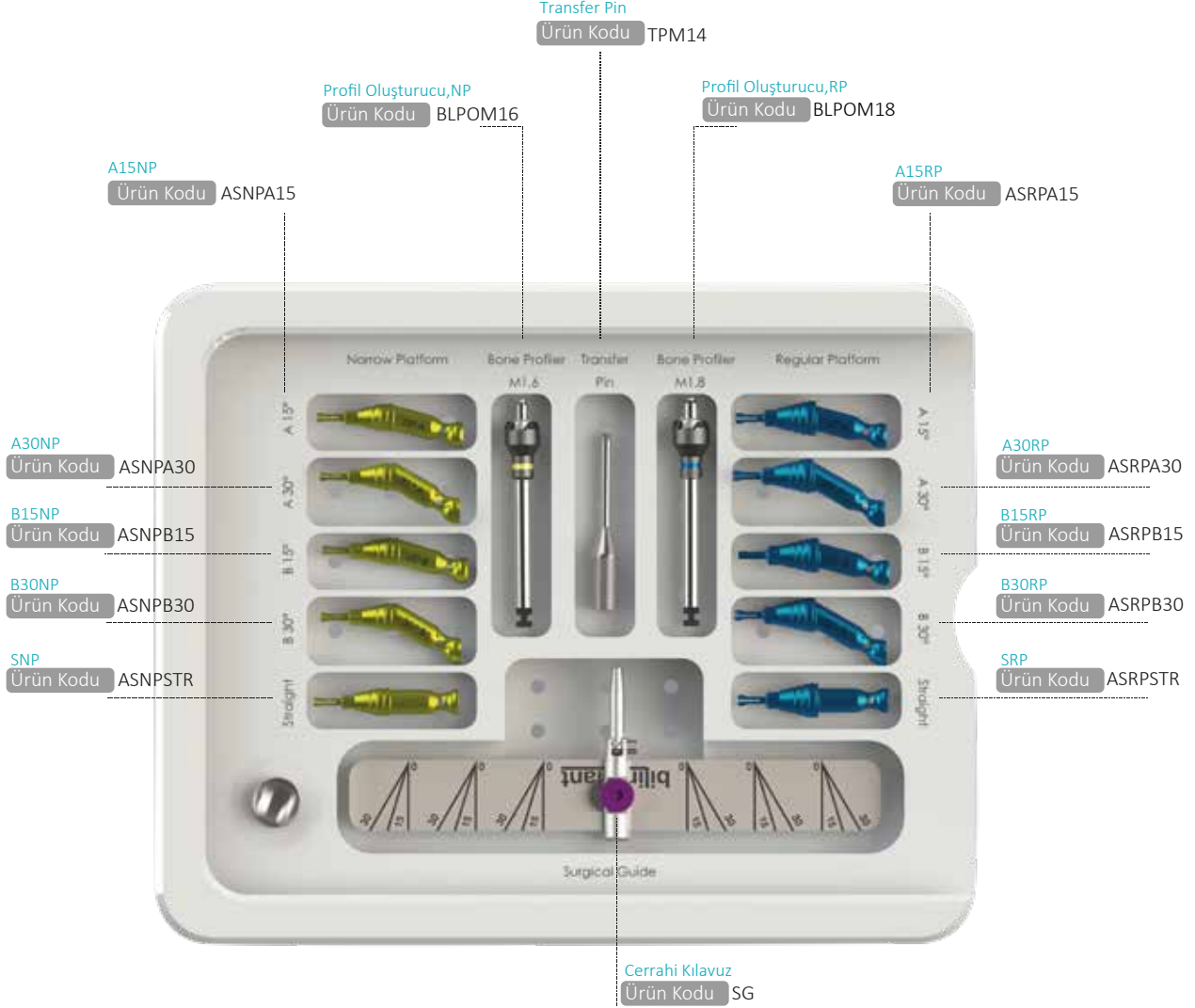

NP : Narrow Platform (M1.6) (Ø3.2 - Ø3.7 implantlar)
RP : Regular Platform (M1.8) (Ø4.1 - Ø4.8 implantlar)

Dijital Çözüm Ortaklarımız



SmartPeg Reference Guide
Valid from December 2018|25016-67

Implant Company	Model	Diameter (mm)	SmartPeg	New
Bilimplant	Bone Level Implant	3.2 - 3.7	100402	Type21
	Bone Level Implant	4.1 - 4.8	100480	Type49


PLANMECA



exocad

Dijital Çözüm Ortaklarımızla Her Şey Daha Kolay ve Daha Güvenli.

Tüm dijital kütüphanelerimize www.bilimplant.com/kutuphane linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

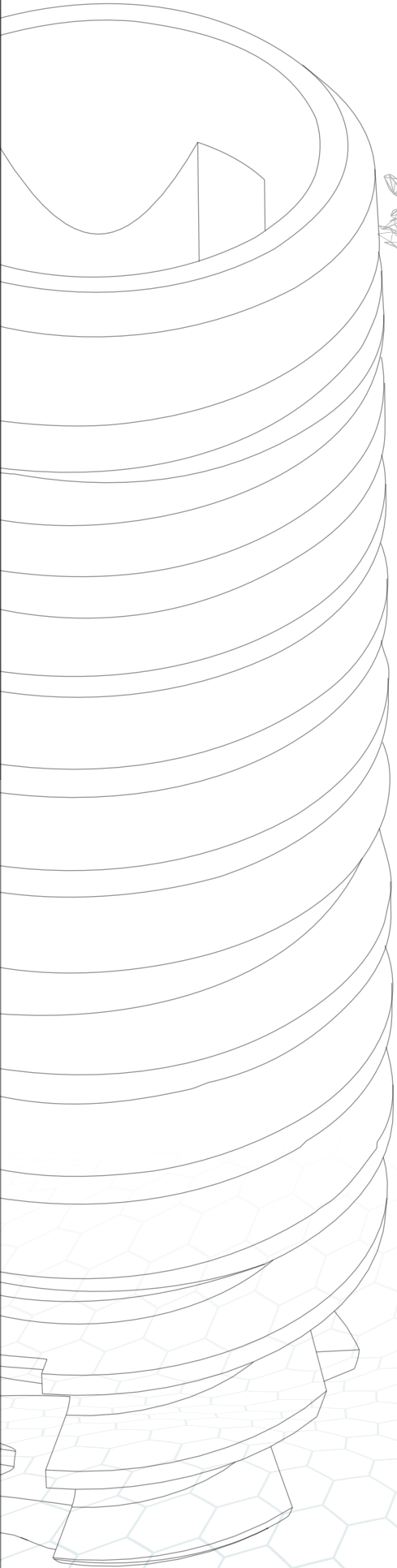

Vizyona
Geleceğe
Tutkuya
Yeniliğe
Bilime
DOKUN

ProimTech Sağlık Ürünleri A.Ş.

Dudullu OSB Mahallesi İmes 305 Sokak C blok No:3 Ümraniye / İstanbul-Türkiye

Türkiye CE 1984
Discover
the potential

www.bilimplant.com

bilimplant
DISCOVER THE SCIENCE